

LESIONI VASCOLARI

- Teleangectasia • Rosacea
- Couperose • Emangioma
- Spider naevi
- Nevo flammeo


LESIONI PIGMENTATE

- Lentigo senile
- Cheratosi attinica
- Xantelasma

LESIONI CUTANEE


- Verruche
- Condilomi
- Fibromi

TRATTAMENTI PRIMA - DOPO

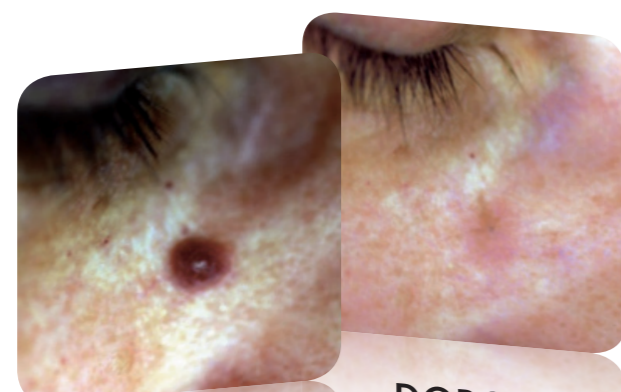

PRIMA

DOPO

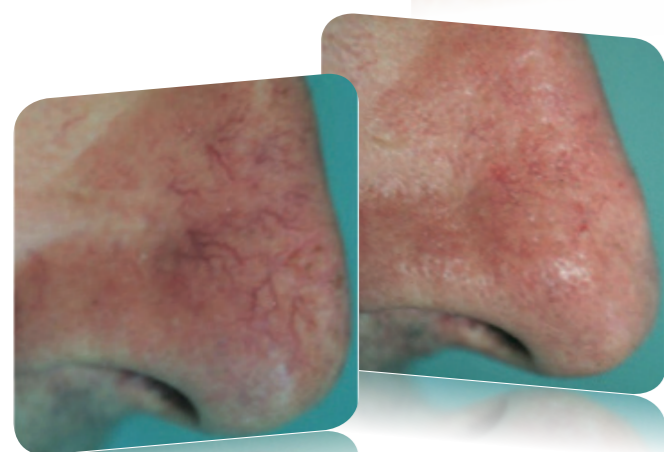

PRIMA

DOPO



PRIMA

DOPO

Foto gentilmente concesse dal Dr. Daniel Cassuto

SPECIFICHE TECNICHE

Velure *S5*

MiXto *VX*

Tipo di Laser	Nd:YV04, Stato solido, duplicato in frequenza (LBO), pompato a diodi	MODALITÀ FRAZIONALE ("VX" ON)	
Lunghezza d'onda	532 nm (Verde)	Diametro spot	1 mm
Potenza	Regolabile da 0.1 a 5 W al tessuto	Area di scansione	10 x 10 mm
Diametro spot	300, 500, 1000, 1500 µm	Indice VX	Regolabile da 1 (0.1 mm) a 8 (0.8 mm)
Modo di esposizione	Continuo, Singolo impulso, Ripetizione d'impulso	Durata degli impulsi	Regolabile da 5 a 1000 msec
Durata degli impulsi	Regolabile da 5 a 1000 msec	MODALITÀ SEQUENZIALE ("VX" OFF)	
Pausa	Regolabile da 30 a 1000 msec	Diametro spot	1 mm
Alimentazione elettrica	100 / 240 Vac, 500 VA (Max) 50-60Hz	Area di scansione	6 x 6 - 8 x 8 - 10 x 10 mm
Dimensioni	35 cm (L) x 43 cm (P) x 23 cm (A)	Durata degli impulsi	Regolabile da 5 a 1000 msec
Peso	12 Kg		

LASERING
Medical Laser

LASERING S.r.l.
Via Staffette Partigiane, 54 - 41122 Modena, Italy
Tel. + 39 059 450 999
Fax + 39 059 311 096
www.lasering.it | www.lasering-med.com
E-mail: lasering@lasering.it

LASERING USA
220 Porter Drive
Suite 120
San Ramon, CA 94583
Phone 866-471-0469
E-mail info@laseringusa.com

CSQ CSQ MED
ISO 9001 ISO 13485
IONet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CE 0051
VELURE S5
è conforme alla direttiva
93/42/CEE

100714V55

Velure *S5*

LO SPECIALISTA PER LESIONI VASCOLARI E PIGMENTATE

LASERING
Medical Laser

Velure S5



Velure S5 è il sistema laser elettivo per trattare in modo sicuro e definitivo lesioni vascolari e pigmentate.

Velure S5 è vincente in un ampio spettro di procedure estetiche come la rimozione di teleangectasie, angiomi, spider naevi, lentiggini solari e molto altro, spesso in un'unica seduta.


Velure S5 è anche indicato per il trattamento di piccole lesioni chirurgiche a livello dermico, come verruche e fibromi.

PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI VASCOLARI

Velure S5 utilizza un cristallo LBO di nuova generazione che, grazie alla sua stabilità, rende il sistema laser più potente ed affidabile.

Velure S5 ha una lunghezza d'onda di 532 nm con un alto coefficiente di assorbimento per l'ossiemoglobina e la melanina.

Velure S5 è un sistema laser selettivo ed efficace durante il trattamento di lesioni vascolari superficiali e lesioni cutanee pigmentate, senza danneggiare il tessuto circostante, eliminando così l'effetto porpora post-trattamento.

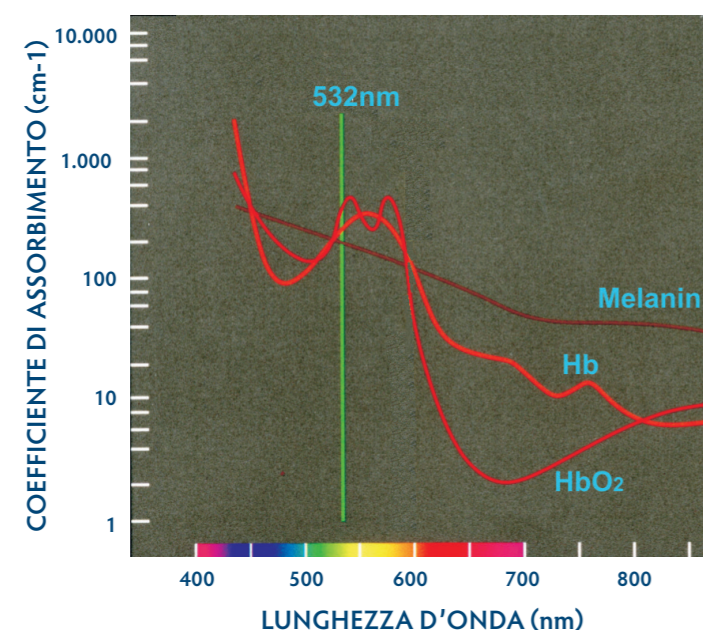

COMPATTO E PORTATILE

Velure S5 si presenta in un'elegante valigia completa di ruote e maniglia retrattile, che ne rende agevole lo spostamento.

Le caratteristiche tecnologiche di **Velure S5** unite ad un design compatto ed ergonomico e ad un peso ridotto, rendono lo strumento perfettamente portatile ed adatto ad ogni ambiente operativo.

Velure S5 è un sistema Plug & Play, quindi è sufficiente collegarlo alla presa di corrente affinché sia immediatamente pronto all'uso.

Velure S5

POTENTE

- ❖ Modalità continua (CW) e pulsata
- ❖ Impulsi brevi
- ❖ Trattamenti efficaci
- ❖ Minimi effetti collaterali
- ❖ Sorgente laser di lunga durata
- ❖ Tecnologia LBO

VERSATILE

- ❖ Ampia gamma di manipoli con differenti spot per ottenere sempre risultati ottimali
- ❖ Scanner **Mixto VX** sequenziale o frazionale per Skin Rejuvenation
- ❖ Specifico per il trattamento di lesioni vascolari e pigmentate
- ❖ Anestesia non necessaria
- ❖ Assenza di effetto porpora

ECONOMICO

- ❖ Facile da usare, software intuitivo
- ❖ Dispositivo compatto, tecnologia affidabile
- ❖ Trasportabilità
- ❖ Senza consumabili
- ❖ Bassi costi di manutenzione




MiXto VX

SISTEMA SCANNER FRAZIONALE PER SKIN REJUVENATION NON ABLATIVO

Velure S5 accessoriato con il sistema scanner **MiXto VX Frazionale** consente il trattamento di **SKIN REJUVENATION**.

Questa procedura non ablativa migliora gradualmente la trama della pelle, le discromie e le rughe d'espressione.

Mixto VX permette di eseguire trattamenti rapidi su ampie aree cutanee **SENZA DOWNTIME**.

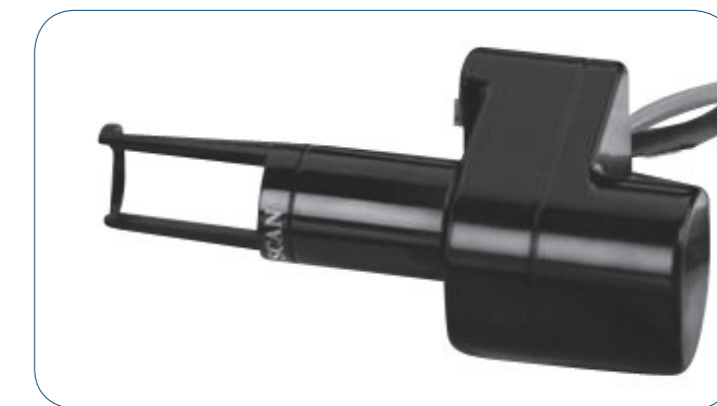

MiXto VX in modalità frazionale utilizza un algoritmo brevettato che produce uno schema di scansione a "Z". Ciò permette di fare trascorrere il maggior tempo possibile tra spot adiacenti durante il riempimento di un determinata area cutanea. Questo schema brevettato permette il massimo raffreddamento del tessuto circostante, diminuendo così il rischio di effetti collaterali e garantendo, allo stesso tempo, il comfort ottimale del paziente.

